


Jak wprowadzić bazę BLOZ z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2008 i utworzyć bufor

1. Uruchomić program AP55-NOWYBLOZ (na dowolnym komputerze, np. administratorze)
2. Zatwierdzić klawiszem ENTER opcję AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA.
3. Włożyć pierwszą dyskietkę do stacji dysków i zatwierdzić klawiszem ENTER prośbę o włożenie dyskietki.
4. Po skopiowaniu danych pojawi się prośba o włożenie drugiej dyskietki.
5. Wyjąć dyskietkę nr 1, włożyć dyskietkę nr 2 i zatwierdzić klawiszem ENTER.
6. Po chwili pojawi się komunikat o zakończeniu aktualizacji bazy BLOZ.
7. Wyjąć dyskietkę nr 2 i powtórzyć czynności dla dyskietki nr 3 (jeśli występuje), wyjść z programu AP55.
8. Wejść do programu AP14-MAGAZYN na komputerze administracyjnym.
9. Komputer rozpocznie odtwarzanie indeksów, co może potrwać kilkanaście minut (w tym czasie można normalnie prowadzić sprzedaż).
10. Uruchomić opcję POPRAWA BAZY LEKÓW I ZAKUPÓW (tzw. „pajęczek”).
11. Upewnić się, że data utworzenia bazy KS-BLOZ pochodzi z co najmniej 21 grudnia (lewy, górny róg „pajęczka”).
12. Nacisnąć klawisz F5, aby zaznaczyć co będzie zmieniane.
13. Jeśli komputer poinformuje, że na dysku istnieje już bufor i zapyta czy go skasować, należy odpowiedzieć pozytywnie (zatwierdzić TAK).
14. Zaznaczyć punkty jak na rysunku poniżej.

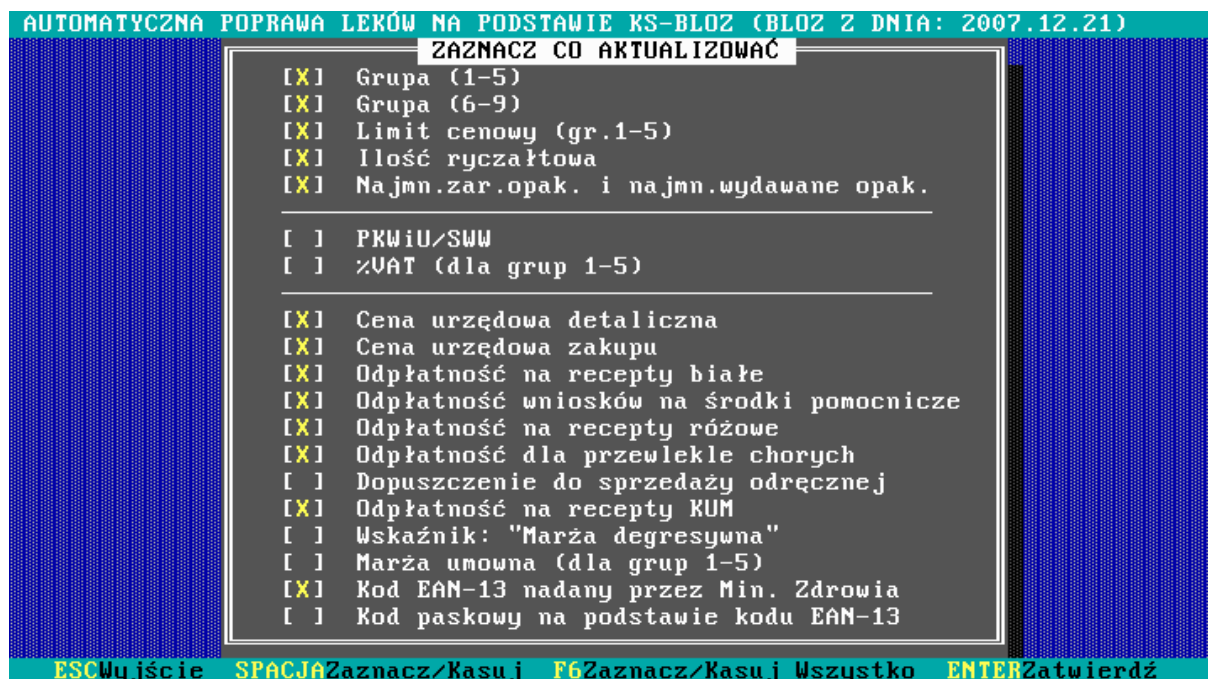

15. Czekać na utworzenie bufora (może to potrwać kilkanaście minut).
16. Po utworzeniu bufora „wejść do niego” klawiszem F4.
17. Dokładnie sprawdzić poprawność dokonanych zmian.
18. Po sprawdzeniu i wyjściu do „pajęczka”, po zakończeniu sprzedaży 31 grudnia, przed sprzedażą 1 stycznia, zatwierdzić bufor klawiszem F9